



Handleiding installeren Healthentia app


Healthentia v3



Innovation Sprint Sprl
Clos Chapelle-aux-Champs 30
Bte 1.30.30
1200 Brussels, Belgium

v3 (25/05/2021)


NL 1 TOEPASSING DOWNLOADEN

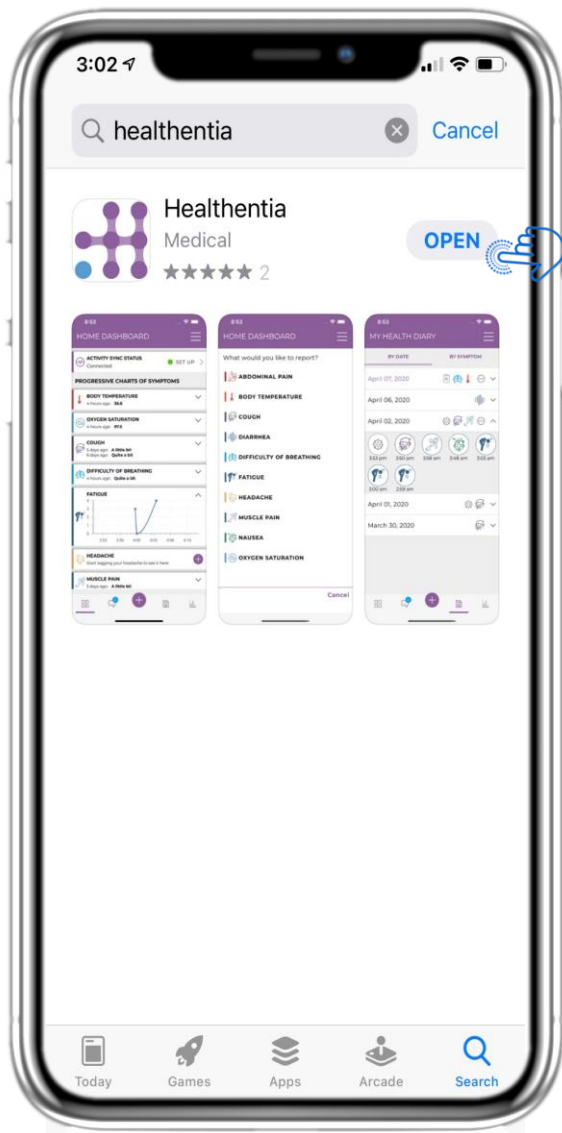

NL Download de Healthentia app op de iOS AppStore of Google Play Store.



NL 2 WELKOM / REGISTREREN

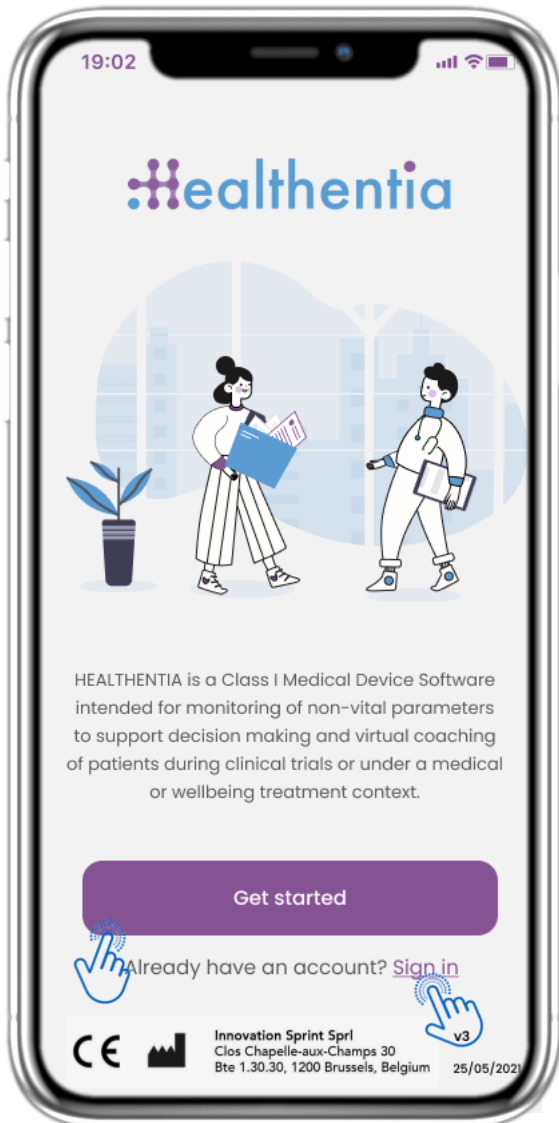

NL 2.0 WELKOMSTPAGINA

Welkomspagina van Healthentia laat zien dat het een medisch hulpmiddel is. Hier kunt u kiezen om een account aan te maken, of om direct in te loggen als u al een account heeft. Kies voor het aanmaken van een nieuw account.



NL

2 TOESTEMMINGEN / UITNODIGINGSCODE




NL

2.1 UITNODIGINGSCODE

Beantwoord enkele vragen om je profiel in te vullen. Via de mail hebt u een uitnodigingscode ontvangen. Vul deze hier in.



NL 2 WELKOM / REGISTREREN

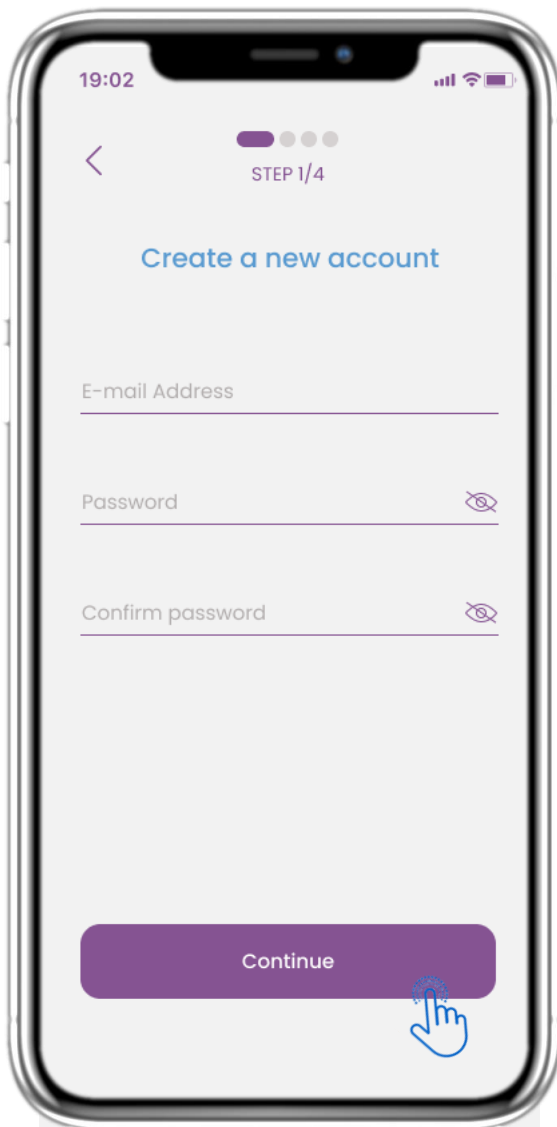


NL 2.2 REGISTREREN

Registreer een nieuwe account met hetzelfde e-mailadres als waar u zich mee heeft aangemeld voor dit onderzoek. Kies een sterk wachtwoord. Gebruik hiervoor geen persoonlijke gegevens.



NL 2 OPSTART VRAGENLIJST

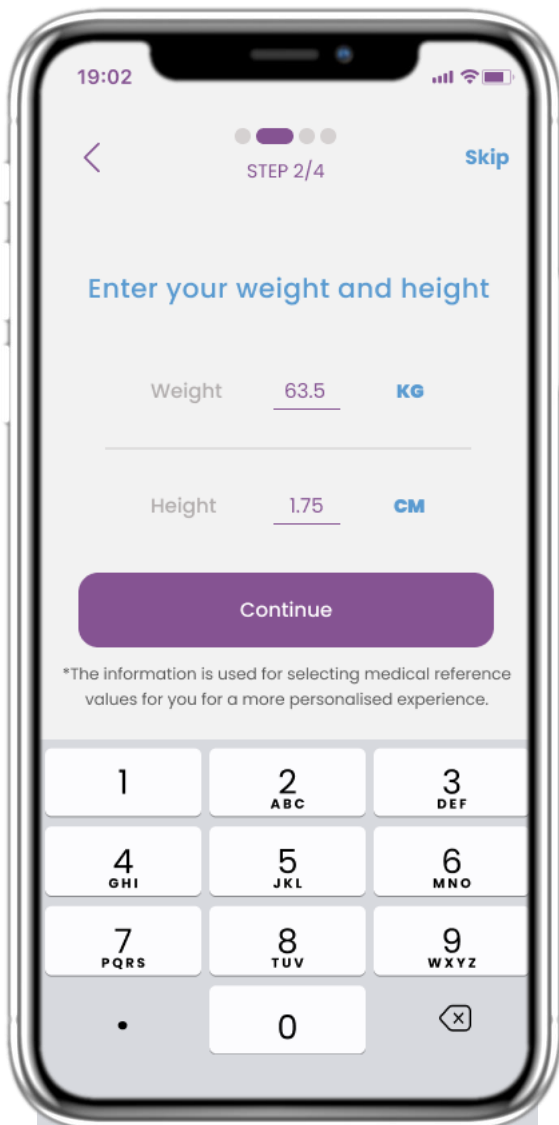

NL 2.3 VERMELD GEWICHT & LENGTE

Voer uw gewicht en lengte in voor uw profiel



NL 2 OPSTART VRAGENLIJST




NL **2.4 SELECTEER GESLACHT**

Maak een keuze voor uw geslacht in uw profiel



NL 2 OPSTART VRAGENLIJST

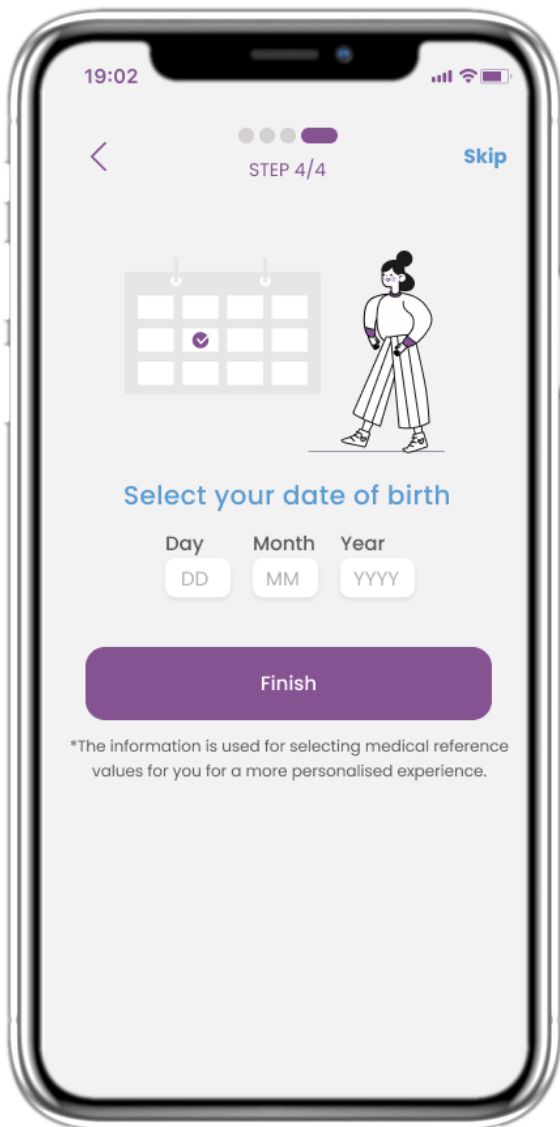


NL **2.5 SELECTEER GEBOORTEDATUM**

Voer uw geboortedatum in in uw profiel



NL

2 TOESTEMMINGEN / UITNODIGINGSCODE

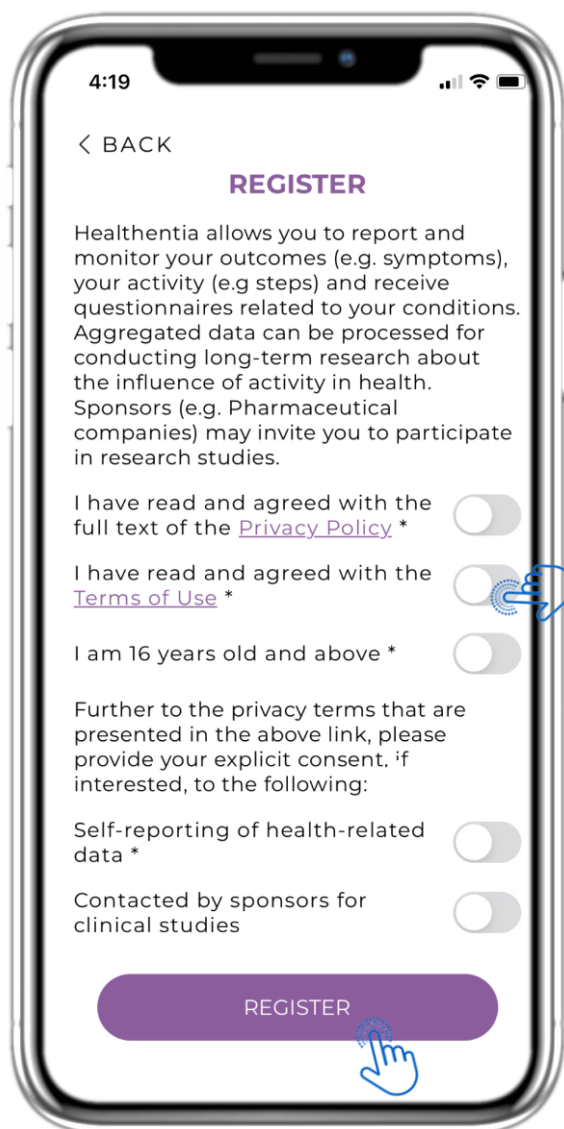

NL

2.6 TOESTEMMING PAGINA

Selecteer of u akkoord gaat met het anoniem delen van uw gegevens voor onderzoeksdoeleinden.

Lees en ga akkoord met de Voorwaarden en het Privacybeleid van Healthentia en geef uw voorkeuren aan met betrekking tot de expliciete toestemmingen.



NL 3 STARTSCHEM & PUSHMELDINGEN




NL 3.1 STARTSCHEM

Op de startpagina wordt u begroet door de chatbot die de vragenlijsten aankondigt die in behandeling zijn. Op de startpagina staan de verschillende widgets die voor de specifieke studie zijn geconfigureerd.



NL 3 STARTSCHEM & PUSHMELDINGEN

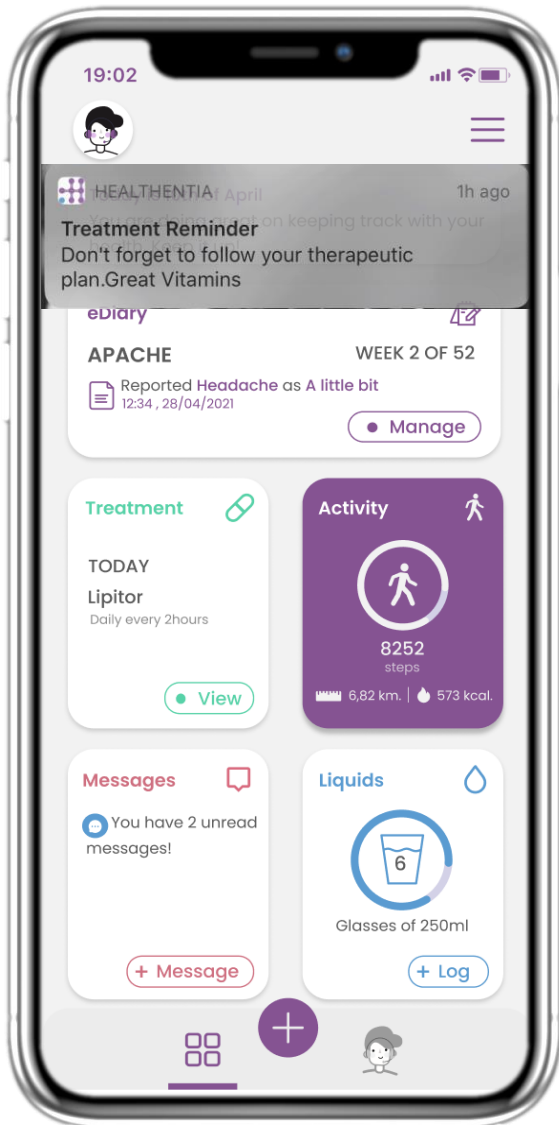


NL 3.2 PUSHMELDINGEN

Healthentia vraagt u om via uw instellingen meldingen toe te staan en zo vragenlijsten en behandelingsherinneringen te kunnen ontvangen.



NL 4 STARTSCHEM WIDGETS

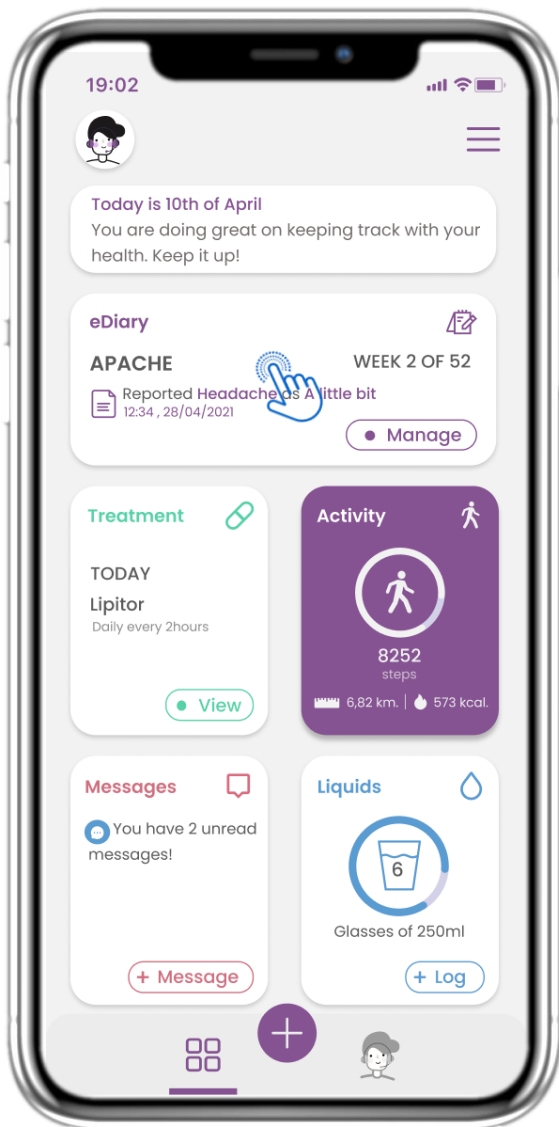


NL 4.1 LOGBOEK WIDGET

Op de startpagina vindt u de logboek widget die wordt gebruikt als een dagboek binnen de studie waar u aan deelneemt.



NL 4 STARTSCHEM WIDGETS

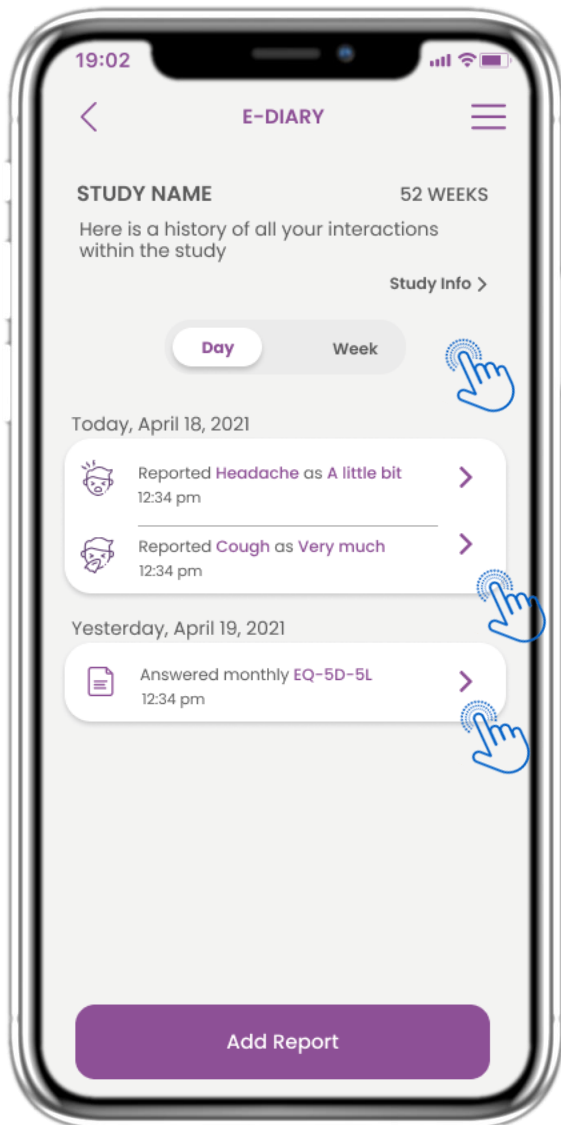


NL 4.2 LOGBOEKPAGINA

Op de logboekpagina vindt u een dagelijkse update van uw rapporten en ingediende vragenlijsten. U kunt hier kijken naar uw dagelijkse en wekelijkse overzichten over de ingevulde gegevens.



NL 4 STARTSCHEM WIDGETS

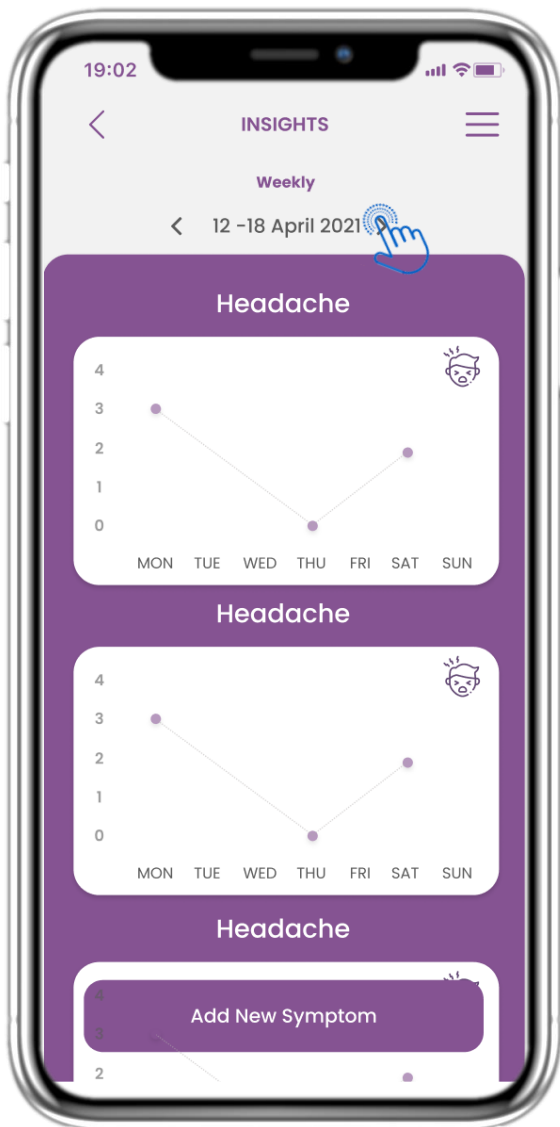

NL 4.3 LOGBOEK WEKELIJKSE INZICHTEN

U kunt grafieken bekijken van de symptomen die u heeft ingevuld. Met de kalender kunt u bladeren door de weken.



NL 4 STARTSCHEM WIDGETS




NL 4.4 BEKIJK GEGEVEN ANTWOORDEN

Ingediende vragenlijsten met de antwoorden kunnen worden ingezien.



NL 4 STARTSCHEM WIDGETS

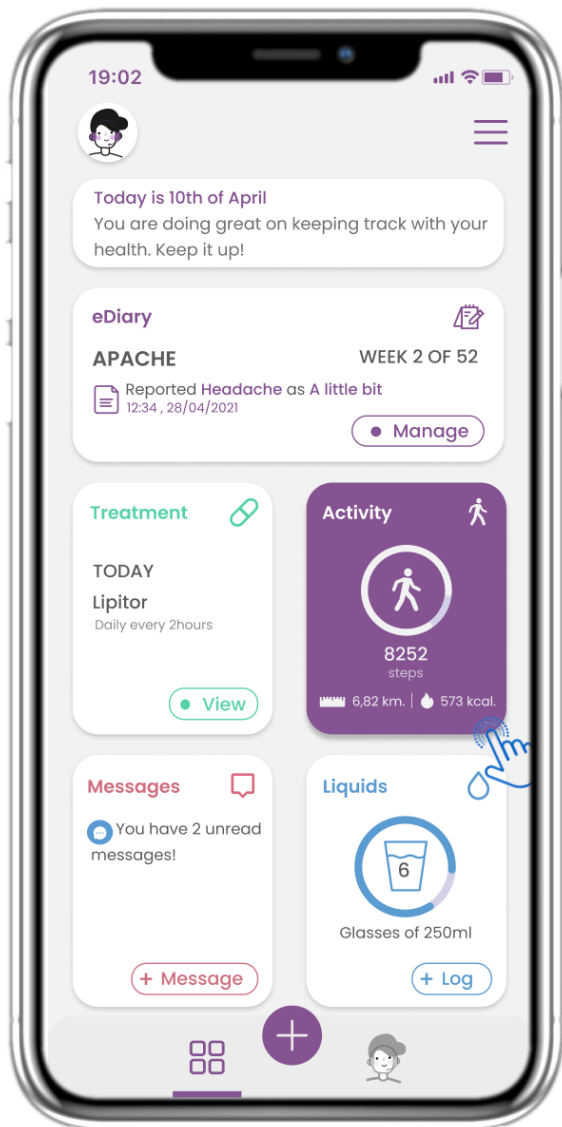


NL 4.5 ACTIVITEIT

Op de startpagina vindt u de Activiteit widget die wordt gebruikt om uw activiteit bij te houden.



NL 4 STARTSCHEM WIDGETS

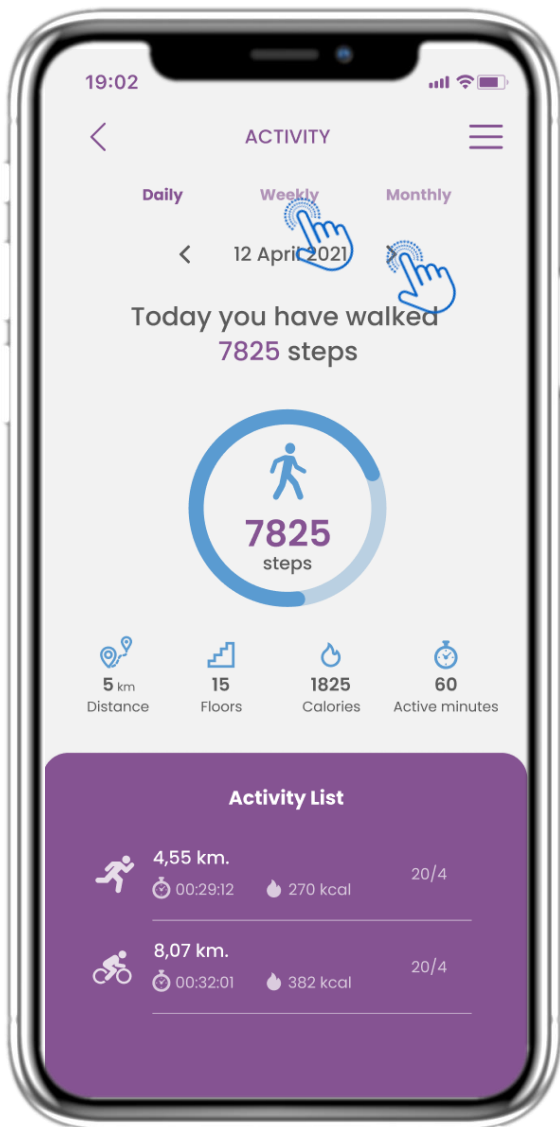


NL 4.6 ACTIVITEITSPAGINA

Op de pagina Activiteit kun je dagelijkse stappen, afstand, etappes, calorieën en actieve minuten bijhouden. Met de kalender beweeg je tussen de dagen en door op "week" te drukken ga je naar de grafieken.



NL 4 STARTSCHEM WIDGETS

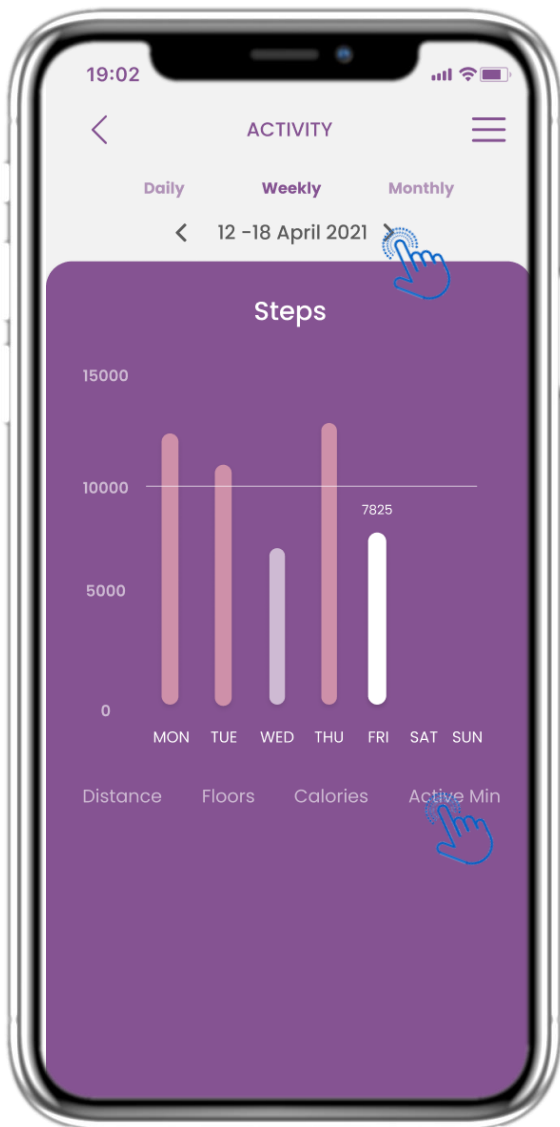


NL 4.7 ACTIVITEITSGRAFIEKEN

Op de wekelijkse overzicht van de activiteitpagina, vindt u grafieken over uw wekelijkse stappen, afstand, verdiepingen, calorieën en actieve minuten.



FR **4 WIDGETS ACCUEIL**
NL **4 STARTSCHEM WIDGETS**
DE **4 HAUSWIDGETS**

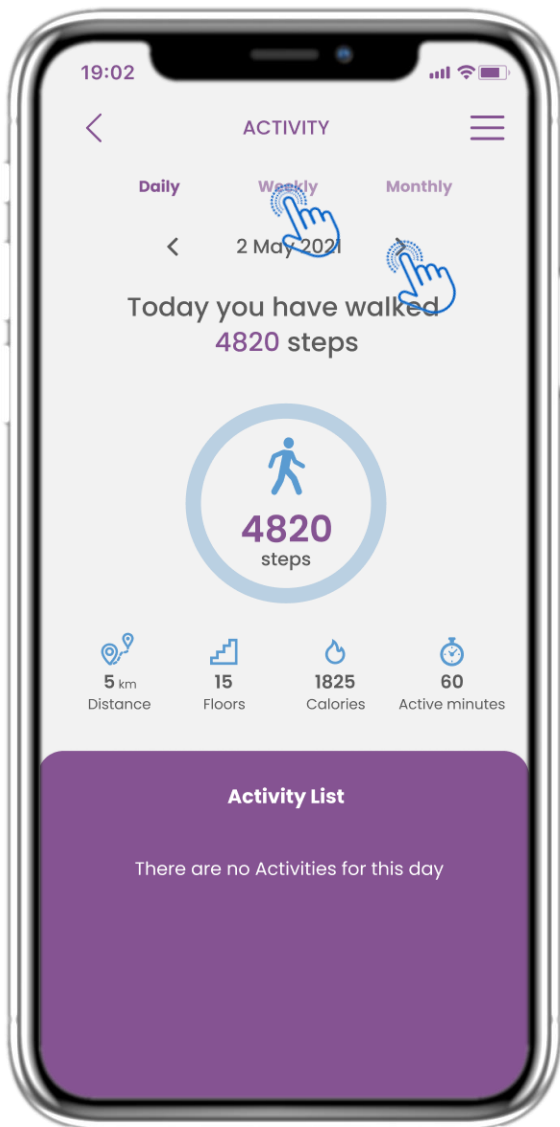


NL

4.8 ACTIVITEITSPAGINA

Als er onderaan de lijst staat dat er geen activiteiten zijn, betekent dat de activiteitsmeter geen activiteiten (bijv. hardlopen) heeft verzameld.



NL 4 STARTSCHEM WIDGETS

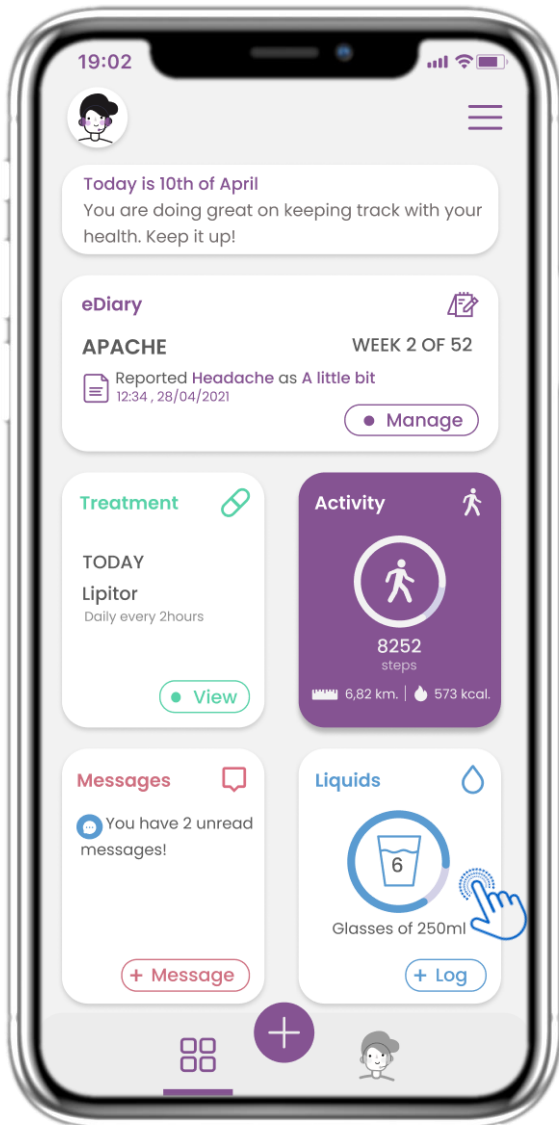


NL 4.9 VLOEISTOFFEN WIDGET

Op de startpagina vindt u de Vloeistoffen widget die wordt gebruikt om uw dagelijkse inname van water en andere vloeistoffen bij te houden.



NL 4 STARTSCHEM WIDGETS

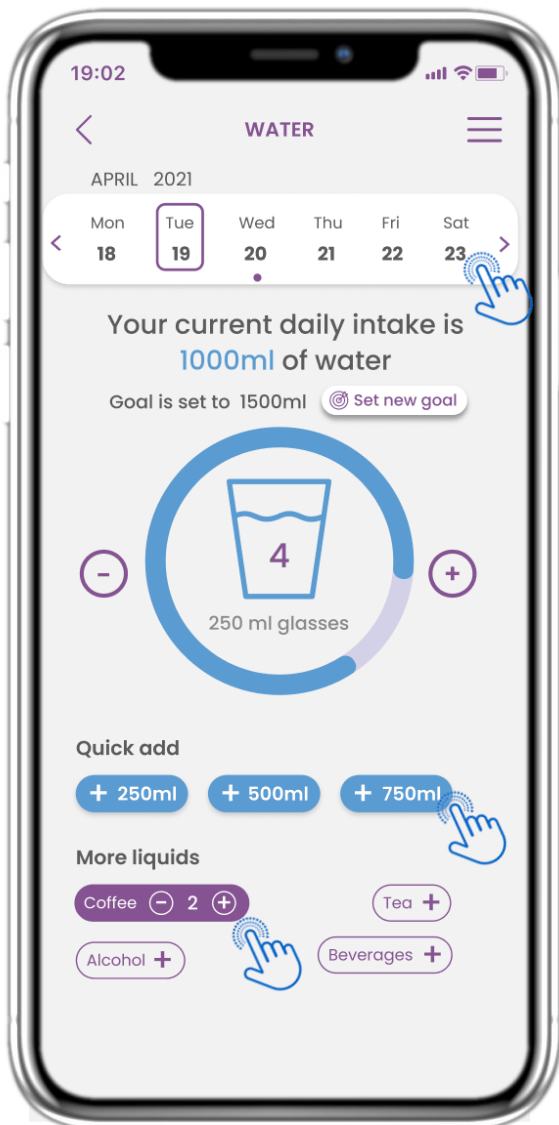


NL 4.10 VLOEISTOFFEN PAGINA

Op de vloeistoffen pagina kunt u glazen water toevoegen met de 250-500-750ml knoppen en kunt u andere vloeistoffen toevoegen zoals koffie of drankjes.



NL

5 RAPPORTEN TOEVOEGEN/VRAGENLIJSTEN BEANTWOORDEN

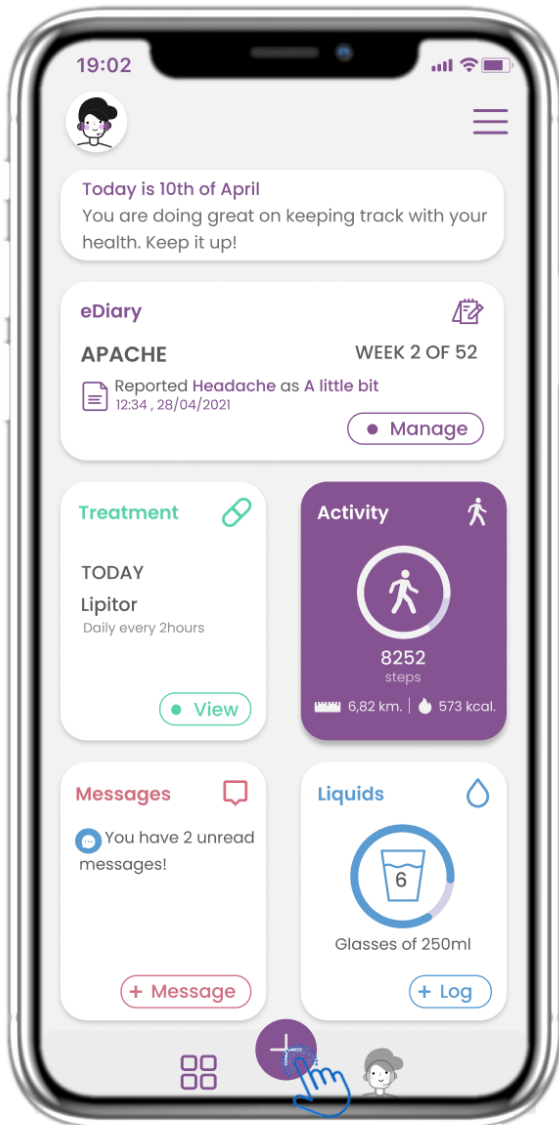

NL


5.1 VERSLAGEN / SYMPTOMEN TOEVOEGEN

Onderaan kunt u kiezen om gegevens in te voeren door op de + knop te drukken over symptomen of lichaamsgegevens.



NL

5 RAPPORTEN TOEVOEGEN/VRAGENLIJSTEN BEANTWOORDEN

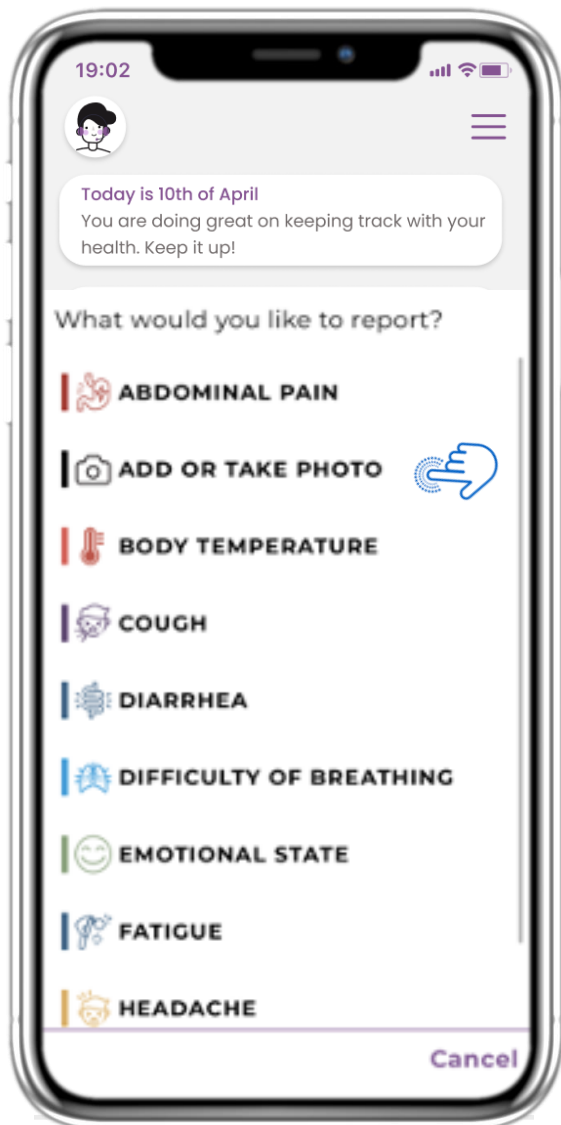

NL

5.2 VERSLAGEN / SYMPTOMEN TOEVOEGEN

Er opent een lijst van beschikbare factoren om toe te voegen. Klik op hetgene waar u wat over wilt rapporteren.



NL 5 RAPPORTEN TOEVOEGEN/VRAGENLIJSTEN BEANTWOORDEN

Do you have a cough?

Not at all

A little bit

Somewhat

Quite a bit

Very much

Next >

Define your cough type:

Dry

Productive

Would you like to submit Questionnaire?


Cancel OK

NL 5.3 RAPPORTEN/VRAGENLIJSTEN BEANTWOORDEN

Beantwoord de vragenlijst met betrekking tot het symptoom dat u geselecteerd hebt. Klik op VOLGENDE om verder te gaan met de vragenlijst. Klik op OK om te verzenden of op ANNULEREN om de vragenlijst te verlaten.



NL 6 CHATBOT

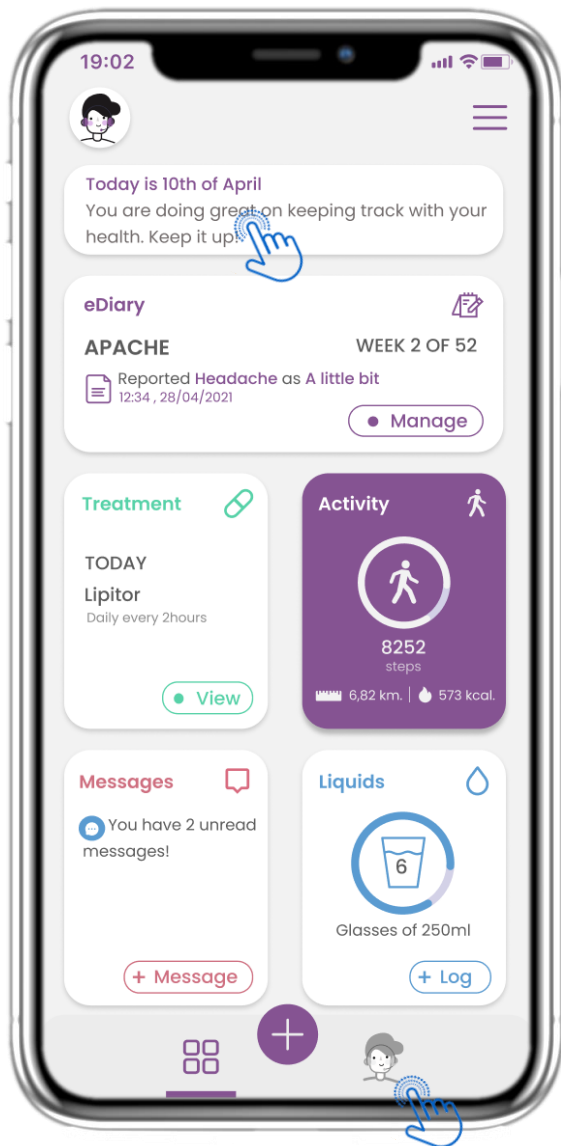

NL 6.1 CHATBOT


U kunt op twee manieren interacteren met de chatbot:

1. Door te klikken op het bericht bovenaan.
2. Door te klikken op het poppetje onderaan.



NL

6 CHATBOT

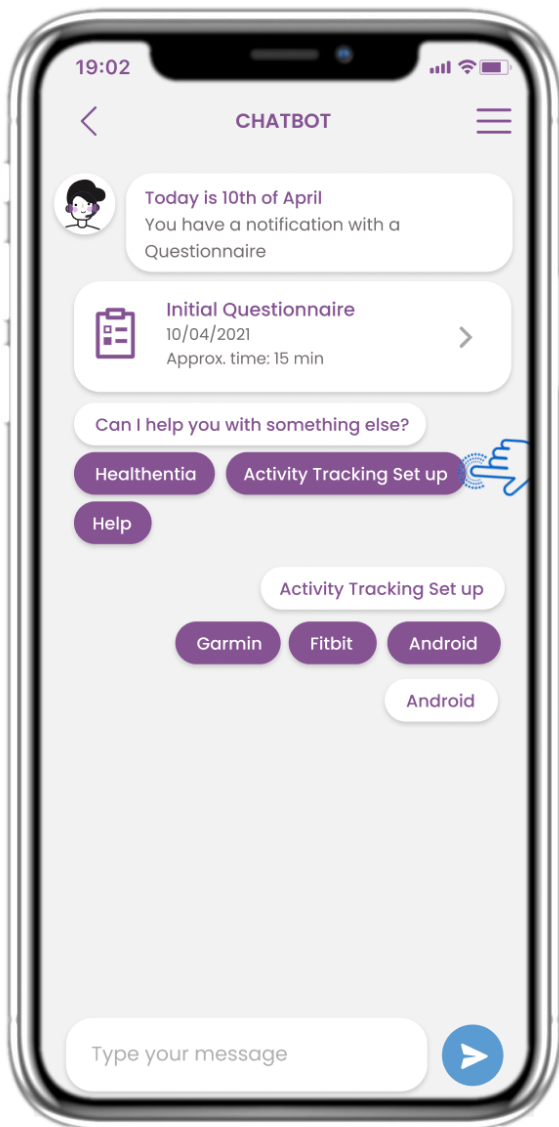



NL

6.2 CHATBOT GESPREK

In de Chatbot kunt u vragen stellen over verschillende onderwerpen. Klik op het onderwerp waar u hulp bij nodig hebt of een vraag over hebt.



NL 7 MENU ZIJBALK

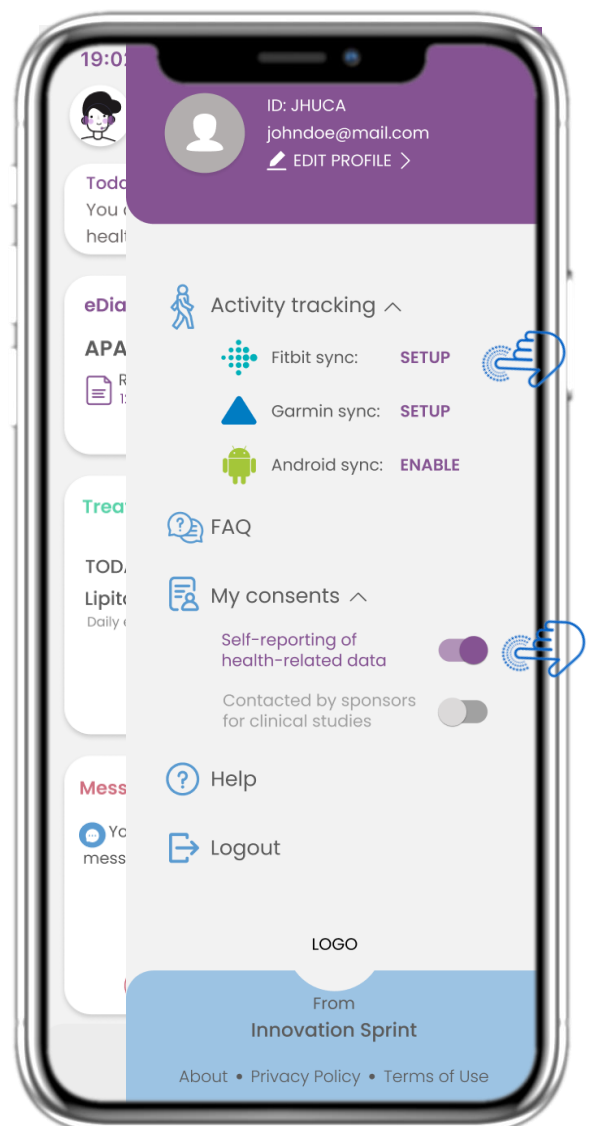
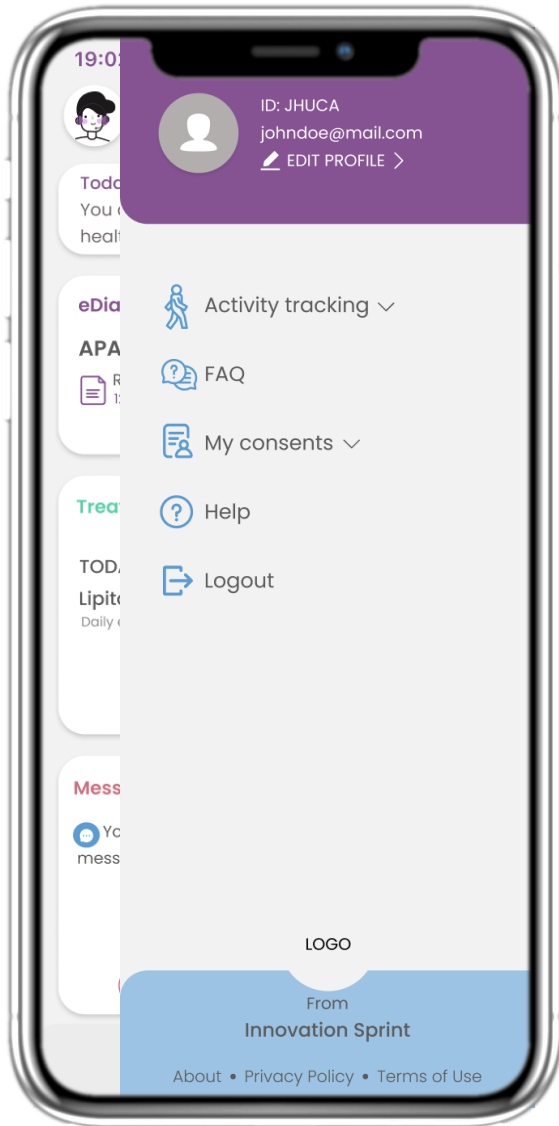


NL 7.1 ZIJBALK OPTIES

In de menubalk kunt u uw profiel bewerken, uw activiteitenmeter instellen en de toestemming die u tijdens de registratie hebt gegeven in- of uitschakelen. U kunt ook toegang krijgen tot sommige inhoudspagina's zoals veelgestelde vragen.



NL 7 MENU – MIJN PROFIEL

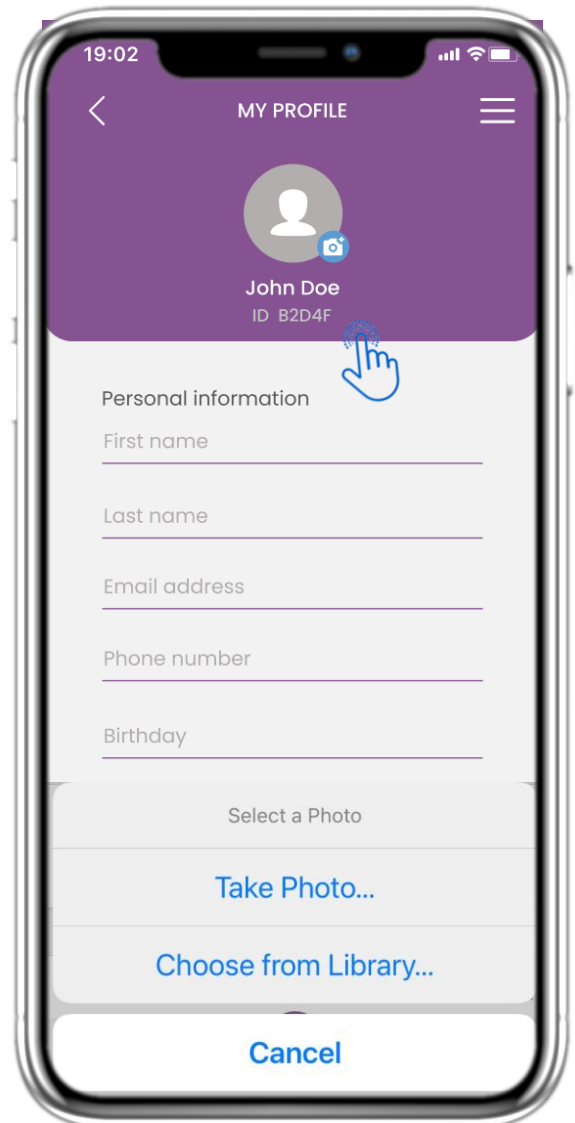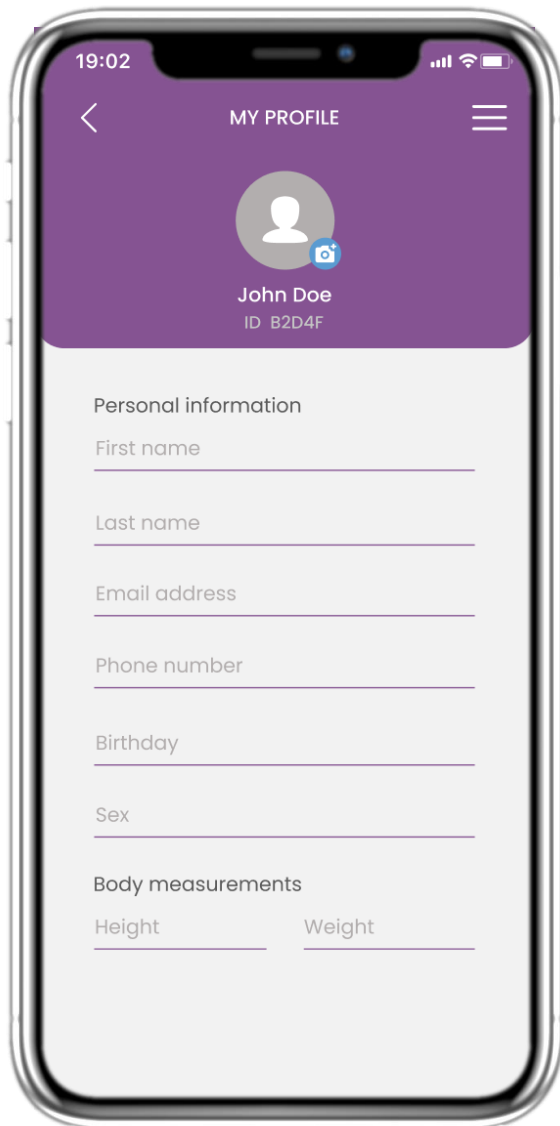


NL 7.2 WIJZIG PROFIEL

U kunt uw profiel bewerken en een profielfoto kiezen. De ID is het identificatienummer dat zal worden gebruikt voor de communicatie.



NL

7 MENU - AFMELDEN

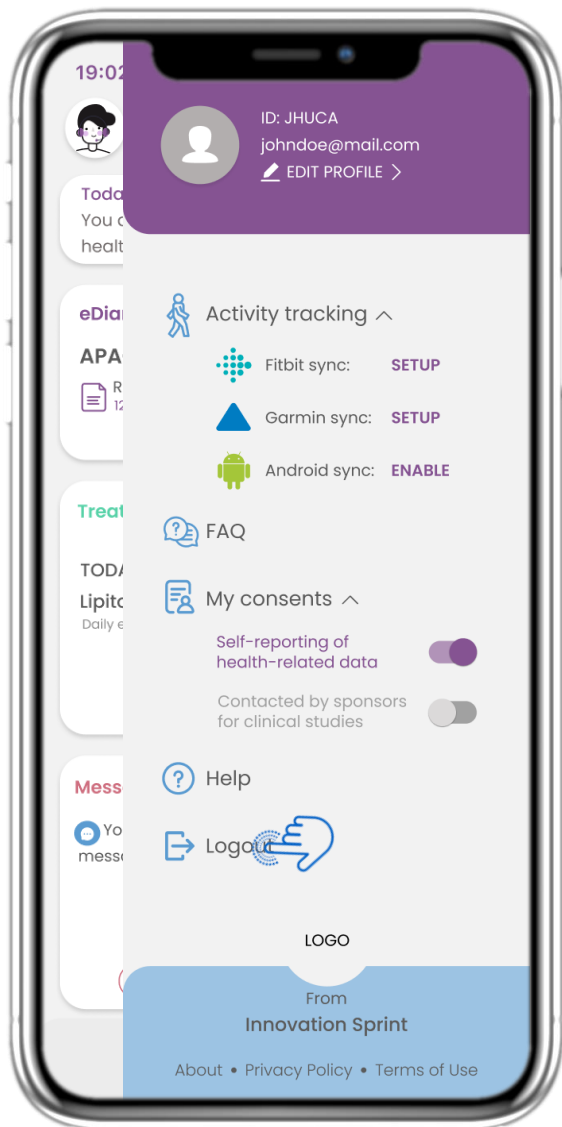

NL

7.3 AFMELDEN

Selecteer om uit te loggen.
Vergeet niet dat Healthentia geen gegevens kan traceren wanneer u bent uitgelogd.





NL

HEALTHENTIA is een klasse I Medisch Hulpmiddel; een beslissingsondersteunende software ontwikkeld door INNOVATION SPRINT en bedoeld voor het monitoren, detecteren, aanbieden van virtuele begeleidingsdiensten en genereren van automatische waarschuwingen betreffende gebeurtenissen, gebaseerd op data uit het dagelijks leven bij patiënten die deelnemen aan klinisch onderzoek, of die het gebruiken als een medisch of welzijnshulpmiddel.

De software is bedoeld voor het monitoren van niet-vitale parameters ter ondersteuning van de besluitvorming en virtuele coaching van patiënten tijdens klinisch onderzoek of in een medische of welzijnsbehandelingscontext.

Voor meer informatie kunt u terecht op: <https://innovationsprint.eu/healthentia>

Voor vragen of verzoeken in verband met privacy kunt u contact opnemen met: dpo@healthentia.com

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met: info@healthentia.com

